



O-Bite

**Твердость для
оптимальной окклюзии.**



Твердость для
оптимальной
окклюзии. **O-Bite.**



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Один из самых твердых материалов для регистрации прикуса среди А-силиконов	> Отсутствие усадки и деформации после установки
Высокая прочность	> Легкость обрезки и финишной обработки > Снижение риска поломки
Длительное рабочее время	> Безопасное нанесение на всю дугу нижней челюсти
Короткое время отверждения в полости рта	> Быстрая фиксация прикуса
Свежий фруктовый аромат апельсина	> Высокий уровень комфорта для пациента



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

O-Bite

Упаковка: 2 картриджа Кому 50 мл, 12 Automix-Tips REF 909765

Экономичный набор: 8 картриджа Кому 50 мл, 50 Automix-Tips REF 909767

Аксессуары: 1 Automix-Dispenser Type 50 10:1 REF 909507
50 Automix-Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation-Tips REF 909203

Идеальная посадка реставраций без утомительной шлифовки.

O-Bite, самостоятельного смешивания
А-силиконовый материал от компании DMG для регистрации прикуса с твердостью по шкале Шора-А 95, обеспечивает идеальную посадку реставраций без утомительной шлифовки окклюзионной высоты.

Еще одним преимуществом является разработанная компанией DMG винилсиликоновая матрица, которая, благодаря однородной структуре, придает материалу высокую прочность и максимальную твердость. O-Bite обрабатывается скальпелем или бором для силикона.

Материал обладает фруктовым ароматом апельсина. Многочисленные выдающиеся свойства материала впечатляют даже экспертов. O-Bite получил 4 звезды от независимого испытательного института «Reality» и первое место по оценкам пользователей среди всех протестированных материалов для регистрации прикуса.

ВЫСОЧАЙШАЯ КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ


O-Bite с твердостью по шкале Шора-А 94 является самым твердым материалом для регистрации прикуса на основе А-силикона. Высокая окончательная твердость материала особенно важна при переносе зарегистрированного прикуса на модели в артикуляторе с целью гарантированного обеспечения идеальной посадки реставраций.

Более мягкие силиконы изгибаются или сжимаются, препятствуя точной артикуляции. Это может привести к нежелательному завышению прикуса, что требует затратного по времени пришлифовывания. Установка завышенной реставрации может привести к существенному дискомфорту в нижнечелюстном суставе.

Благодаря своей высочайшей твердости O-Bite обеспечивает идеальное гнатологическое соотношение зубов.



ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ ШОРА-А ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

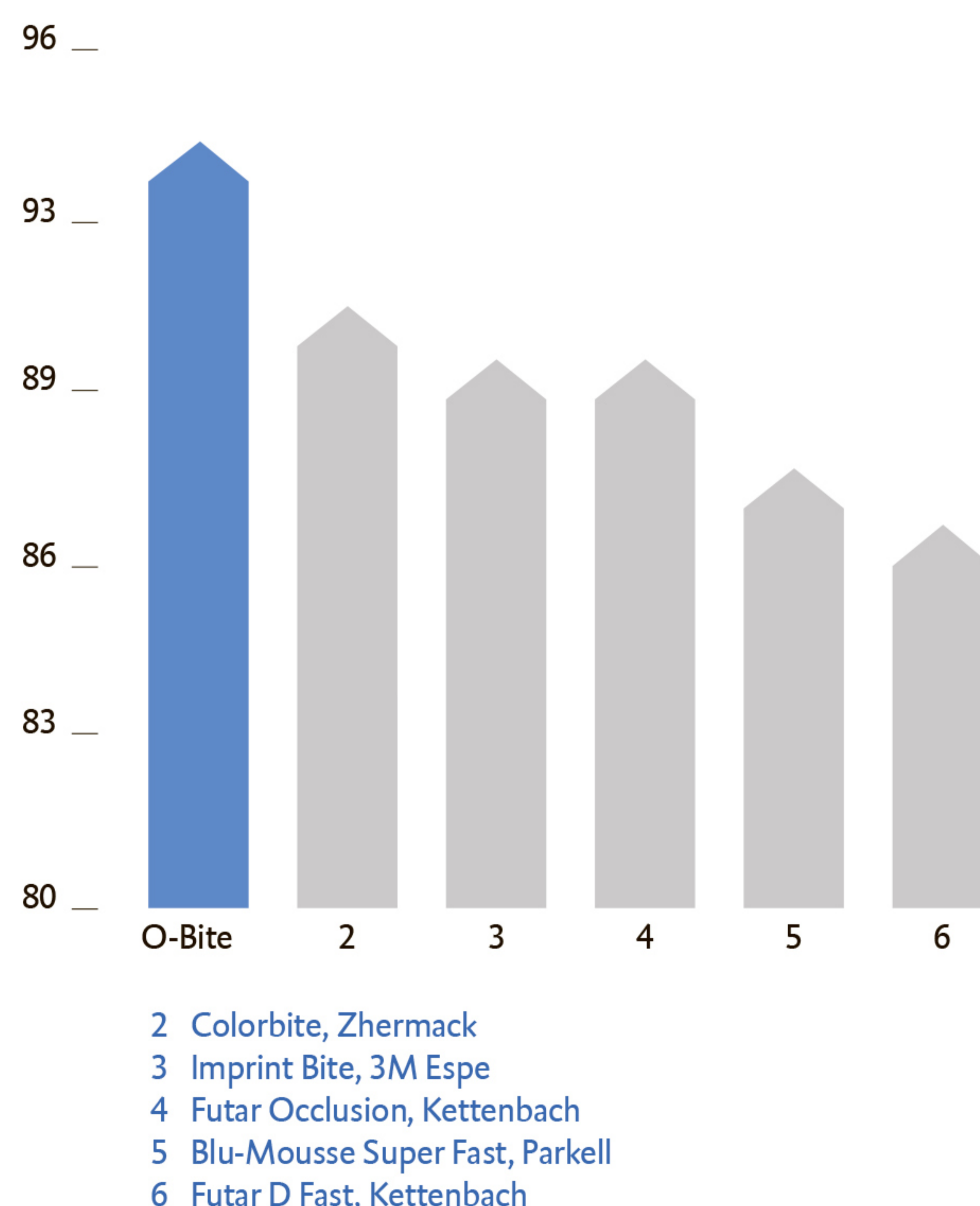

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря разработанной DMG винилсиликоновой матрице, O-Bite обладает высокой прочностью.

Структура материала на основе А-силикона достигается за счет силиконовых цепочек равной длины, которые формируют особо стабильные связи при отверждении.

На практике эта характеристика гарантирует высокое сопротивление излому при извлечении, обработке и репозиции на модели.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	O-Bite
Рабочее время [мин]	0:30
Извлечение из полости рта после начала смешивания [мин]	1:30
Твёрдость по шкале Шора-A (1 час)	> 93
Размерная стабильность [%]	< 0,3



Прямое нанесение O-Bite.




Пациент с желаемой окклюзией.



Регистраторы прикуса перед снятием.



Простая обработка скальпелем или фрезой для силикона.

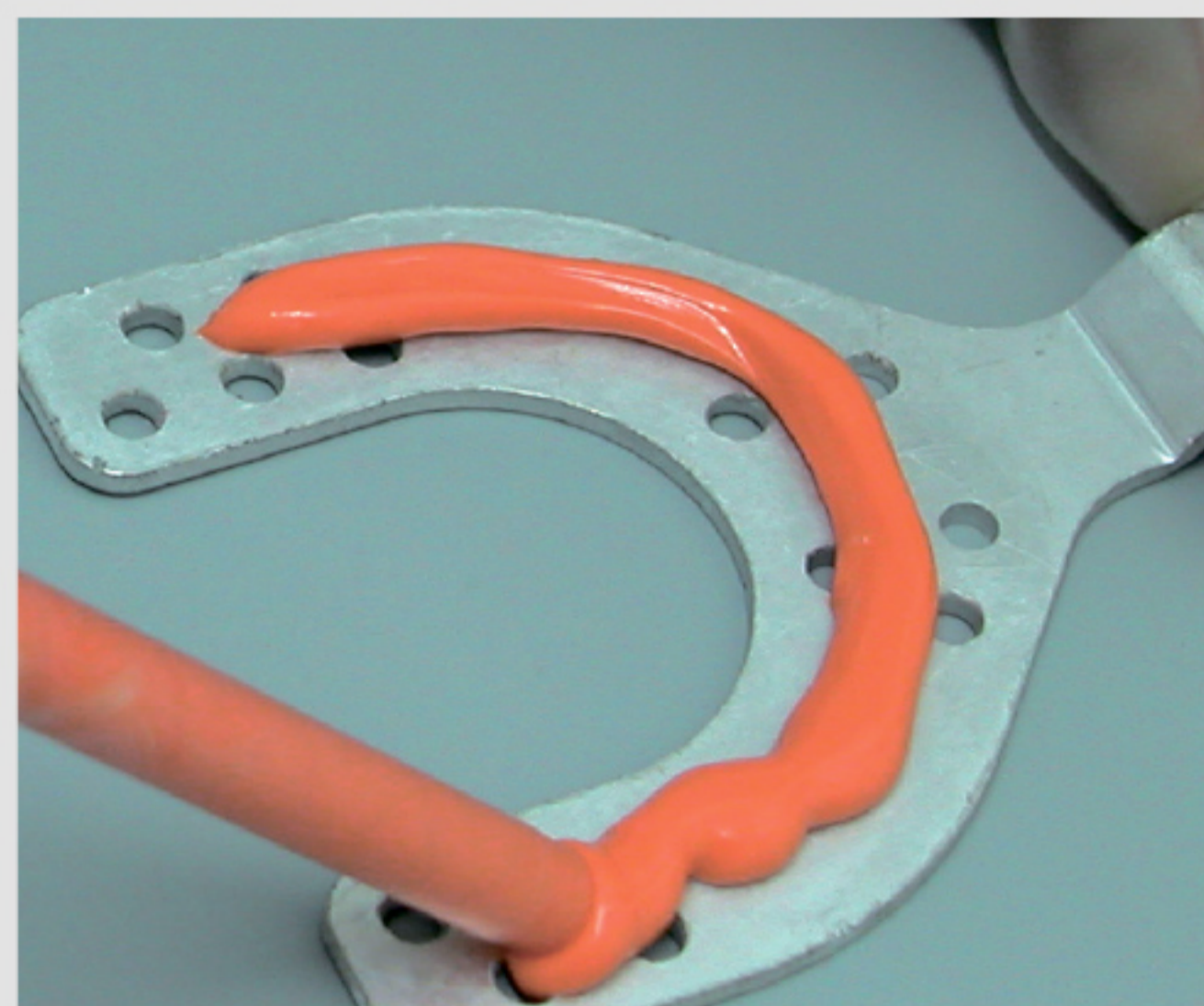


Нанесение O-Bite на прикусную вилку.



Регистрация с помощью прикусной вилки для лицевой дуги.



Лицевая дуга после регистрации прикуса.

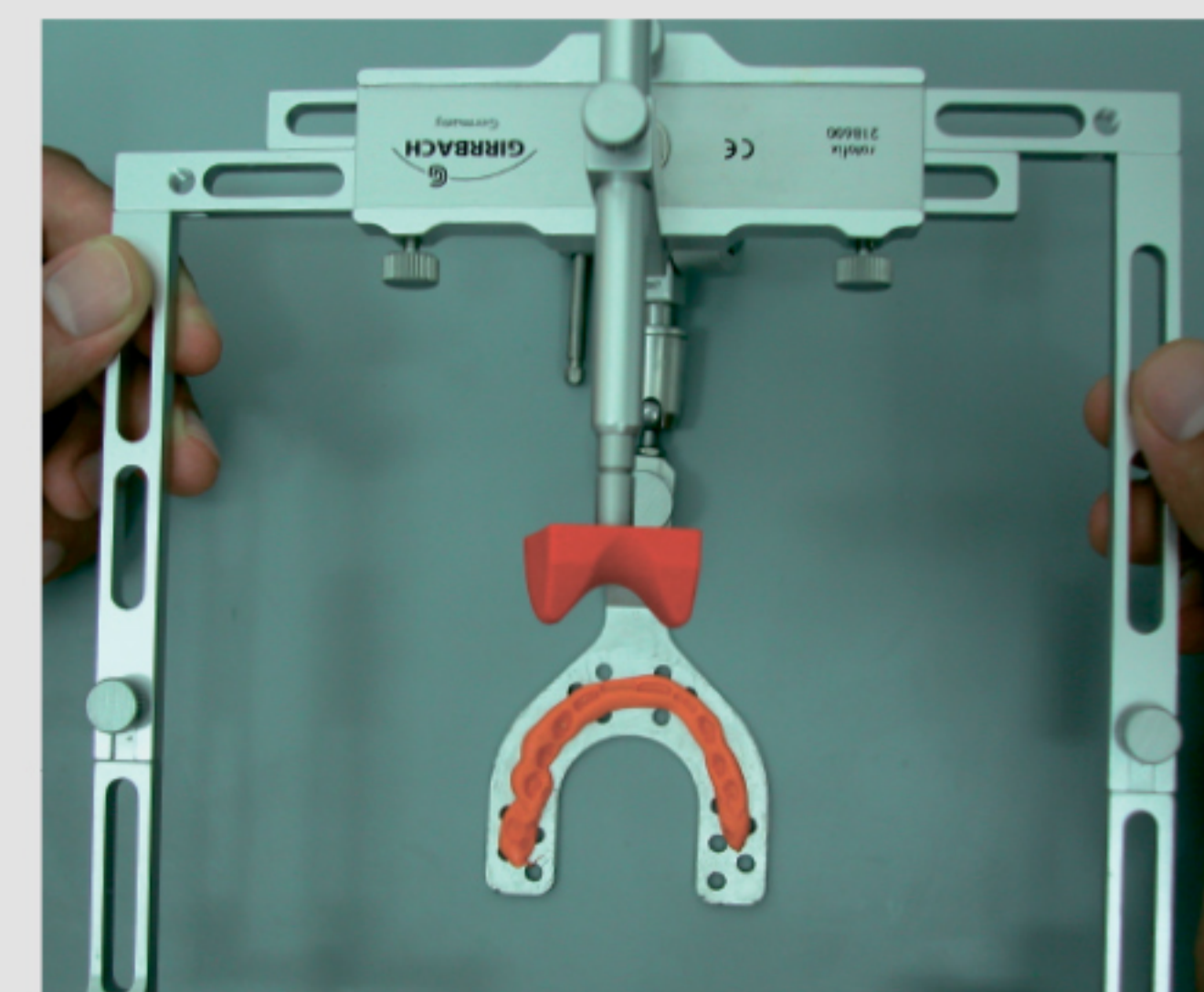

Лицевая дуга с материалом O-bite для переноса в артикулятор.

Эксклюзивный дистрибьютор в России:



«ФАРМГЕОКОМ-МОСКВА»

г. Москва, 115432, Проектируемый проезд 4062,
д. 6, стр.16, Бизнес Центр «Port Plaza», м. Технопарк
Тел.: 8 (800) 333 6863, +7 (495) 150 8881
info@pharmgeocom.ru, pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта 25Д
Тел.: +7 (812) 245 6833, +7 (921) 187 7343
spb@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-НОВОСИБИРСК»

г. Новосибирск, ул. Державина 47
Тел.: +7 (919) 390 5280 novosibirsk@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

г. Екатеринбург, ул. Фурманова 123
Тел.: +7 (343) 243 5563 ekaterinburg@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КРАСНОДАР»

г. Краснодар, ул. Морская 54
Тел.: +7 (861) 245 7000 krasnodar@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-СОЧИ»

г. Сочи, ул. Ландышева, д.12/6а
Тел.: +7 (918) 093 2900 rsalata@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САМАРА»

г. Самара, пр-т Масленникова 25
Тел.: +7 (846) 211 0037 samara@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-БАШКИРИЯ»

г. Уфа, пр-т Октября 11\3
Тел.: +7 (347) 200 0403 ufa@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КАЗАХСТАН»

г. Костанай, ул. Каирбекова 377
Тел.: +7 (800) 333 6863 info@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ВОРОНЕЖ»

г. Воронеж, Московский проспект, 19 б
Тел.: +7 (800) 333 6863 voronezh@pharmgeocom.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

